


# Catalyst Cortisol 검사 결과에 따른 해석 코멘트 확인

Catalyst™ Cortisol 검사에 제공되는 해석 코멘트는 환자에게 가장 적절한 다음 조치를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 중요한 정보를 최대한 활용하기 위해 아래 질문들을 고려하시고, 이어지는 단계를 따라주세요

- + 같은 환자에게 여러 번의 Cortisol 검사를 실행하고 계신가요? 그런 경우, 이미 첫 Cortisol 검사를 실행하셨다면, 아래의 '**추가 검사...**' 지침을 따라 각 정량 결과가 순서대로 그룹화되도록 하고, **종합적인 해석 코멘트**를 확인하시기 바랍니다.
- + **프로토콜 정보를 입력하셨나요?** 정확한 결과 해석 코멘트를 확인하시려면, 환자 검사 시 올바른 프로토콜과 프로토콜 단계를 선택해야 합니다. 아래 안내된 분석기별 작업 프로세스를 꼭 따라 주세요.

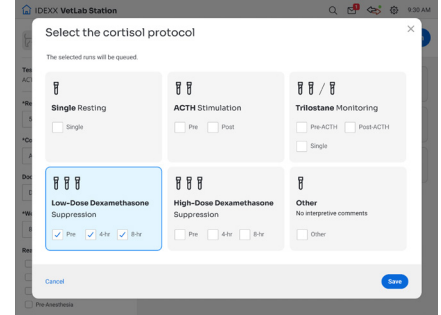

## 최초 코르티솔 검사 시

## 추가 검사/다단계 코르티솔 검사 시

### Catalyst One™ 화학 분석기



IDEXX VetLab™ Station에서 검사를 시작합니다. 기기 선택 화면에서 **Catalyst One**을 누른 다음 **코르티솔**을 누릅니다. 원하는 프로토콜과 추가 프로토콜 단계를 선택 후, **저장**을 누르고 **이어서 실행**을 누릅니다.

최초 검사가 진행될 때 선택된 모든 프로토콜 단계는 IDEXX VetLab Station 홈 화면의 처리 중 목록에 표시됩니다. 다음 검체를 처리할 때는, 목록에서 사용 가능한 다음 검사를 선택하고, **대기열에 추가됨**을 누른 후 **검사 시작**을 누릅니다.

### Catalyst Dx™ 화학 분석기



IDEXX VetLab Station 에서 평소와 같이 검사를 시작합니다. 검사가 완료되면, 화면의 안내에 따라 프로토콜과 프로토콜 단계를 확인하고 **제출**을 누릅니다.

**참고:** 프로토콜/프로토콜 단계를 나중에 입력하려면 처리 중 목록에서 환자를 선택하고, **세부 사항 추가**를 누른 다음 환자의 프로토콜 정보를 선택합니다.

추가 결과가 최초 결과와 함께 그룹화되고 해석 코멘트를 받으려면

1. IDEXX VetLab Station 에서 해당 환자의 최초 Cortisol 결과를 찾거나, 또는 홈 화면의 대기 중 목록에서 해당 환자를 선택합니다.
2. **검사 추가**를 누른 후 **결과 추가**를 누릅니다.
3. 기기 선택 화면에서 **Catalyst Dx**를 선택합니다.
4. 검사가 완료되면, 화면의 안내에 따라 프로토콜 정보를 선택하고 **제출**을 누릅니다.

**중요:** Catalyst One과 Catalyst Dx 화학 분석기를 모두 보유하고 있으며, 환자의 Cortisol 결과 추적 또는 추가/다단계 Cortisol 검사를 수행하려는 경우, IDEXX에서는 모든 Cortisol 검사를 동일한 분석기에서 동일한 검체 유형으로 수행할 것을 권장합니다.

## 정량 결과 및 해석 코멘트를 확인하려면

환자의 결과가 준비되었다는 메시지가 IDEXX VetLab Station 좌측 하단에 표시되면 해당 메시지를 누릅니다. 다단계 Cortisol 검사에서 추가 검사가 이루어진 경우, 결과는 가장 최근의 추가 검사(상단)부터 초기 검사(하단)까지 순서대로 나열되며, 종합적인 해석 코멘트는 가장 최근의 결과와 함께 나타납니다.